



SIEGE DE TOILETTE RELEVABLE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

www.elevaclic.es

Battery DL2



SIEGE DE TOILETTE RELEVABLE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer l'installation et l'utilisation.





DIMENSIONS

Avant l'installation:

- Tout d'abord, mesurez la largeur des toilettes, qui doit être inférieure à 45 cm - 17".
- L'espace de chaque côté des toilettes doit être d'au moins 12 cm-5".


- L'angle d'élévation est de 30°, cette zone doit être exempte d'objets et d'obstacles.

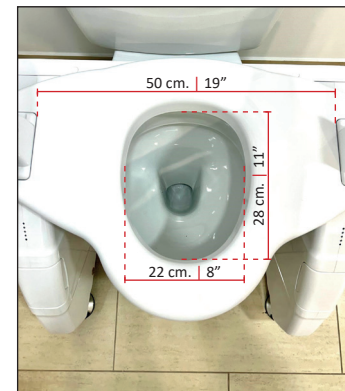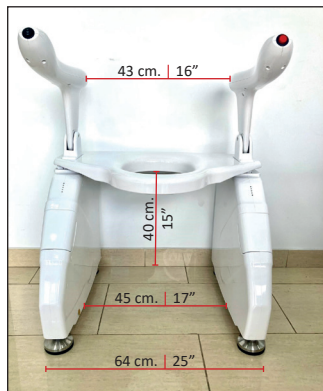

ACCESSOIRES



A - Vis de verrouillage de la main courante x2

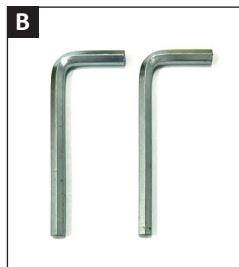

B- Clé Allen pour la main courante x2

C



C- Télécommande x1



D - Vis de fixation pour toilettes x2



E - Clé hexagonale pour le montage des toilettes x1

F



F - Chargeur x1

SPÉCIFICATION

Spécifications du produit:

- Alimentation pour la charge des batteries: **220-240 V CA, 50-60 Hz.**
- Tension de fonctionnement : **24 V.**
- Puissance nominale : **130 W.**
- Une fois complètement chargées, les batteries peuvent être levées et abaissées **120 fois.**
- Indice de protection **IP44** contre l'eau.
- Angle d'inclinaison **30°.**
- Exigences d'installation. Largeur des toilettes: **<45 cm <17"**.
- Charge maximale **220 Kg.**
- Poids du produit: **25 kg.**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- La surface de ce produit est en plastique technique haute résistance et se nettoie avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni rincer à l'eau.
- L'unité principale ne nécessite aucun entretien ni lubrification.
- Évitez de mouiller la barre de poussée de l'unité principale.
- En cas d'utilisation par plusieurs personnes, une désinfection est recommandée après chaque utilisation.

FONCTION DU PRODUIT




Bouton de levage

à un clic position optionnelle:
droite ou gauche.



Bouton d'alarme

à un clic position optionnelle:
droite ou gauche.

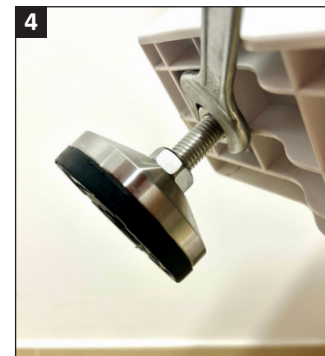

ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE DES PIEDS

1. Les pieds peuvent être relevés et abaissés de 0 à 15cm - 6".
2. Ajustez la hauteur des pieds de levage de manière à ce que la traverse arrière corresponde à la hauteur de vos toilettes et que le levage soit de niveau en position basse.
3. Une fois la hauteur souhaitée et le niveau corrects obtenus, tournez et soulevez l'écrou jusqu'à ce qu'il soit placé au-dessus du pied.
4. Serrez délicatement l'écrou à l'aide d'une clé plate jusqu'à ce qu'il soit bien fixé et fermement en place.

INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DES ACCOUDOIRS

Raccordez le câble d'alimentation du bras au câble de la structure. Alignez la connexion et serrez le collier, en veillant à ce que le raccordement corresponde à celui illustré sur l'image.



Alignez l'accoudoir comme indiqué sur l'image **(A)**, puis insérez-le dans la fente et verrouillez-le **(B)**. Fixez ensuite l'accoudoir au cadre principal à l'aide des vis de blocage **(C)**. Serrez avec la clé Allen **(D)**.




FIXATION DE LA STRUCTURE AUX TOILETTES

1. Dévissez l'abattant et le couvercle des toilettes, en ne laissant que la base en céramique.
2. Insérez les chevilles en caoutchouc noir dans les deux trous des toilettes.
3. Retirez le cache de protection en plastique blanc de la traverse de la structure. Pour ce faire, tirez-le verticalement. Fixez les goupilles à la pièce métallique plate à l'aide du long boulon. Déplacez la structure vers les toilettes.
4. Alignez la plaque métallique avec le trou des toilettes à l'aide de la clé Allen et des 2 vis, puis fixez la traverse aux supports métalliques plats fixés aux goupilles.



N'oubliez pas: remettez le cache de protection de la traverse à sa place d'origine.

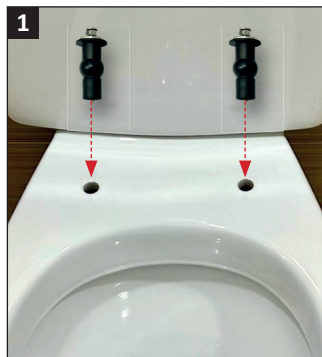

À PROPOS DES BATTERIES

Méthodes de chargement:



Ce produit est équipé de deux batteries haute capacité et fonctionne de manière autonome ; il ne nécessite aucune source d'alimentation externe.

1. Le voyant bleu s'allume lorsque la batterie est complètement chargée. Le nombre de voyants verts indique le niveau de batterie restant. Lorsque le voyant rouge s'allume, la batterie doit être rechargée ; rechargez-la dès que

possible.

2. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée, éteignez l'interrupteur du récepteur ; le laisser allumé consommera de l'énergie en continu.

Veillez à une utilisation raisonnable pour assurer une longue durée de vie à la batterie.

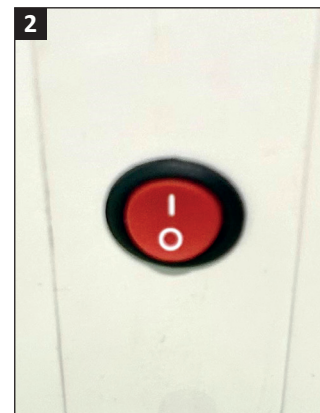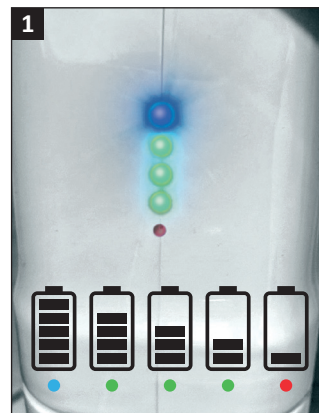

REMARQUES, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- 1- Veuillez lire attentivement et intégralement les instructions de ce manuel.
- 2- Les personnes à mobilité réduite doivent être supervisées ou assistées lors de l'utilisation de ce produit.
- 3- Avant utilisation, assurez-vous que tous les composants sont correctement assemblés et serrés
- 4- Ne pas dépasser la charge maximale admissible du produit, soit 220 Kg.
- 5- La barre d'appui est conçue pour une prise en main facile en position debout ou assise ; utilisez les deux côtés simultanément.
- 6- Ne reposez pas tout votre poids sur un seul accoudoir ; répartissez-le uniformément de chaque côté, chaque côté supportant la moitié de votre poids.
- 7- Une surcharge du produit peut endommager ou casser la rampe.
- 8- Ne vous tenez pas debout sur le produit.
- 9- Tenez-le éloigné des sources de chaleur.
- 10- Maintenez une charge de batterie minimale de 30 % pour un fonctionnement optimal.
- 11- Tout problème relatif à ce produit doit être signalé au distributeur.
- 12- Environnement : Lorsque cet appareil arrive en fin de vie, il ne doit pas être considéré comme un déchet ordinaire, mais comme un déchet dangereux et polluant, et doit donc être déposé dans les zones de recyclage et d'élimination spécifiques, conformément à la directive 2024/884/UE.



GARANTIE ET EXCLUSIONS DE GARANTIE

Garantie:

- Le fabricant garantit que ce produit est livré sans défaut.
- Tous les produits sont couverts par la garantie constructeur officielle pendant 3 ans, conformément à la réglementation en vigueur. La batterie est garantie 2 ans.
- Pour faire valoir la garantie, vous devrez fournir le ticket de caisse.
- En cas de dysfonctionnement majeur survenant dans l'année suivant la date d'achat, nous remplacerons l'article gratuitement ; nous ne le réparerons pas. Pour toute assistance après-vente, veuillez nous contacter info@elevaclic.es



Exclusions de garantie:

1. Pièces de rechange non fournies par le fabricant ou le distributeur agréé. En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez nous contacter.
2. Les défaillances de l'unité qui ne sont pas dues à des défauts de matériaux ou de processus, comme celles résultant d'une mauvaise utilisation ou de dommages causés par la qualité de l'installation.
3. Usure naturelle, remplacement régulier des pièces, casse ou dommages causés par des facteurs externes.
4. Dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation ou des instructions d'installation.
5. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des dommages accidentels, des dommages matériels ou des pertes de matériel.
6. Les conditions de garantie sont claires et explicites, garantissant les droits et les intérêts des consommateurs et offrant une garantie solide à chaque client.



DISTRIBUÉ PAR: **AZULCOR GESTION, S.L.U.**

C.P. 41520 - EL VISO DEL ALCOR, SEVILLA
ESPAGNE

TLF. +34 649641255

info@elevaclic.es / www.elevaclic.es

Fabriqu  en R.P. Chine

Le distributeur se r serve le droit d'apporter des modifications et des am liorations   son produit, ainsi que de l g res variations de couleur. Aucune responsabilit  n'est accept e en cas d'erreurs d'impression ou de traduction.